

NOUVEAUTÉ

BREVET DÉPOSÉ

ÉVOLUTIF


HMS - VILGO
fabricants de matériel médical

EURO 2000 ULTRA

Trolley 3 parties



Le lit médicalisé design, confortable,
certifié conforme aux normes
et conçu pour faciliter le montage
et le démontage.

LES NOUVEAUTÉS :



- La fonction hauteur variable dispose désormais d'un arrêt intermédiaire à la montée et à la descente du lit.

Cette nouvelle position confort facilite le lever et le coucher de l'utilisateur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur variable :

- minimale : 29 cm
- maximale : 82 cm

Dimensions :

- sommier : 204 x 90,4 cm
- Totale : 211 x 99,4 cm

Poids patient maxi : 135 kg

Charge maxi : 200 kg

MONTAGE SIMPLIFIÉ

Evitez les Troubles musculo-squelettiques : le montage et démontage s'effectuent en position debout, sans effort.

EURO 2000 SUR TROLLEY 3 PARTIES



Le lit est monté jusqu'à la position intermédiaire



Positionnement du demi-sommier pied.



Positionnement du demi-sommier tête.




Le lit est monté jusqu'en haut (bouton hauteur variable)



Basculement des deux demi-sommiers et assemblage sans effort.



Euro 2000 :
lit 2 fonctions
Euro 2002 :
lit 3 fonctions

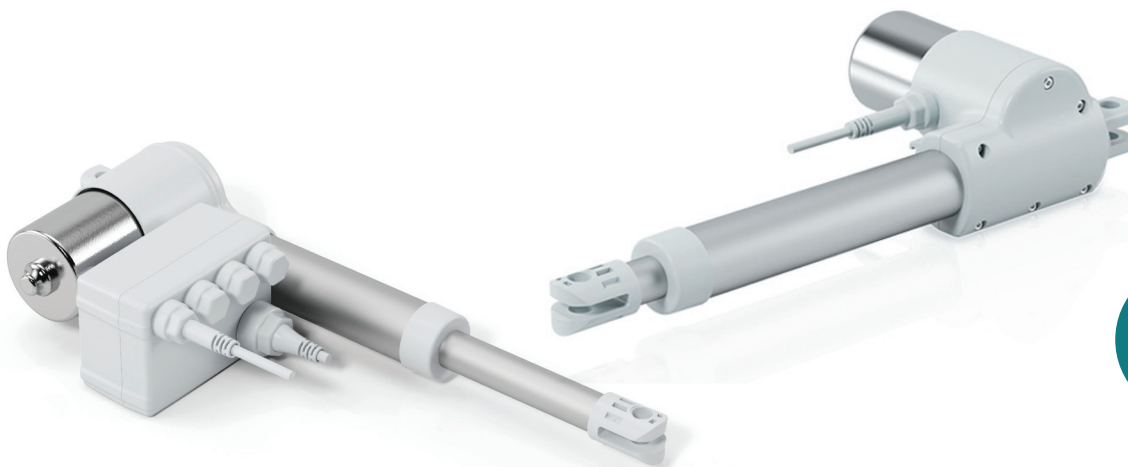


IP 67

Motorisation DEWERT :



- Branchement simplifié : Les vérins et la télécommande se branchent sur n'importe quel port du boîtier de connection. Seule la prise secteur se branche sur le plus gros emplacement.
- Moteurs moins encombrants et moins lourds, centrale beaucoup plus petite.
- Tous les câbles sont facilement détachables, sans outil.
- Garantie 6 ans
- Protection IP 67 : Etanche. Plus besoin de démonter les moteurs pour le nettoyage des lits.

Emplacements réservé
à la prise d'alimentation

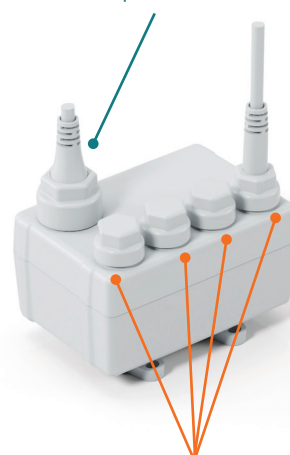

Emplacements vérins
et télécommande
au choix

TÉLÉCOMMANDE

- Rétro-éclairée de série
- Verrouillage de chaque fonction séparément par un aimant
- Câble plus long et détachable aux deux extrémités
- La centrale se situe dans la télécommande. Plus facile à changer qu'un moteur en cas de panne.

